



RežimA

(standardní)

Zlepšuje metabolismus a celkový zdravotní stav.

→ Stimulaci se zlepšuje metabolismus čtyř oblastí (funkce oběhového systému, funkce zažívacího systému, endokrinní funkce, funkce imunitního systému).

Operační doba : cca 36min 30 vteřin,
termální stimulace (60 vteřin)

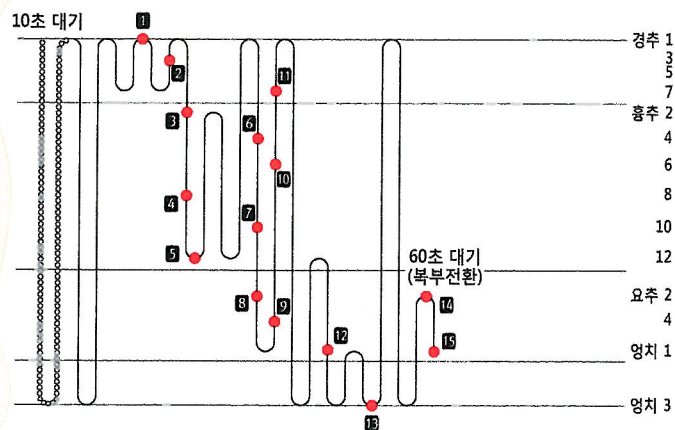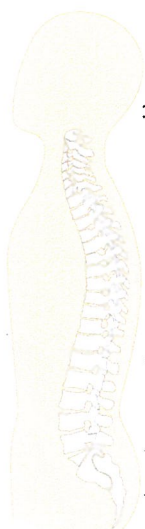

Obratle	Část těla ovlivněna nervovým spojením	Symptomy, které mohou vzniknout tlakem na nervová spojení
1 Krční 1	prokrvení hlavy, hypofýza, kůže na temeni, obličejové kosti, mozek, vnitřní a střední ucho, sympatický nervový systém	Bolest hlavy, nervozita, nespavost, rýma, vysoký krevní tlak, migréna, chronický únavový syndrom, zapomnětlivost, chronická únava
2 Krční 3	tváře, vnější ucho, obličejové kosti, zuby	neuralgie, neuritida, akné, ekzém
3 Hrudní 2	srdce, koronární tepny	Srdeční dysfunkce, bolest na hrudi
4 Hrudní 8	Slezina	Nízká odolnost, onemocnění jater
5 Hrudní 12	Tenké střevo, lymfatický oběh	revma, bolesti v důsledku plynatosti, neplodnost
6 Hrudní 4	Žlučník	žloutenka, pásový opar
7 Hrudní 10	Ledviny	Onemocnění ledvin, chronická únava, tvrdnutí cév, zánět ledvin, zánět pánevní ledvinné
8 Bederní 2	Červovitý přívěšek slepého střeva, břicho, horní část nohou	Křeče, dušnost
9 Bederní 4	prostata, svaly dolní poloviny zad, sedací nerv	Ischias, bolest v kříži, časté močení, bolest zad
10 Hrudní 6	Žaludek	Onemocnění zažívacího traktu, zažívací potíže
11 Krční 7	Štítná žláza, burzitida ramene, loket	nachlazení, bolest v ramenou, štítná žláza, bolest břicha
12 Křížový 1	Kyčelní kost, hýždě	Skolióza páteře, prostatitida, zánět močového měchýře, necitlivost nohou
13 Křížový 3	konečník, řitní otvor	hemeroidy, svědění, bolest kostrče
14 Bederní 2	Červovitý apendix, břicho, horní část nohou	Křeče, dušnost
15 Křížový 1	Kyčelní kost, hýždě	Skolióza páteře, prostatitida, zánět močového měchýře, necitlivost nohou


Režim1

(základní)

Upravuje funkci vnitřních orgánů a vnitřností a udržuje celé tělo v rovnováze.

→ Stimuluje akupunkturální body na těle, které jsou propojeny s vnitřními orgány.

*Operační doba: cca 36 minut 30 vteřin,
termální stimulace 100 vteřin (M3500)*

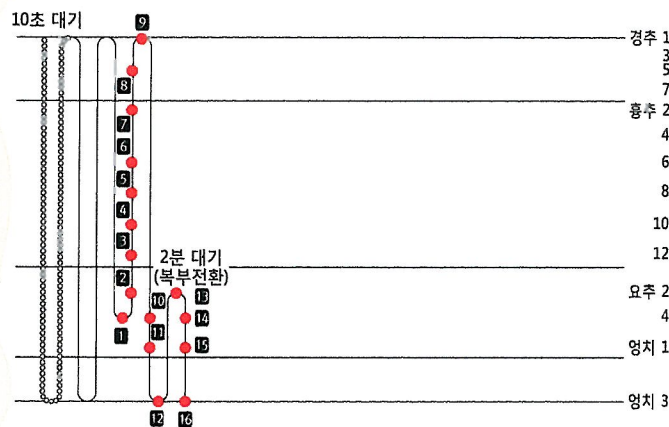

Obratle	Část těla ovlivněna nervovým spojením	Symptomy, které mohou vzniknout tlakem na nervová spojení
1 Krční 4	prostata, svaly kolem spodní části páteře, sedací nerv	ischias, bolest v kříži, časté močení, bolest zad
2 Krční 2	Červovitý přívěšek slepého střeva, břicho, horní část nohou	Křeče, dušnost
3 Hrudní 12	Tenké střevo, lymfatický oběh	revma, bolesti v důsledku plynatosti, neplodnost
4 Hrudní 10	ledviny	Onemocnění zažívacího traktu, chronická únava, kornatění tepen, neuritida, zánět pánvičky ledvinné
5 Hrudní 8	slezina	Nízká odolnost, onemocnění jater
6 Hrudní 6	žaludek	Zažívací potíže, pálení žáhy,
7 Hrudní 2	srdce, koronární tepny	Srdeční dysfunkce, dušnost
8 Krční 5	hlasivky, hltan	Zánět hrtanu, chrapot
9 Krční 1	Prokrvení hlavy, hypofýza, kůže na temeni, obličejové kosti, mozek, vnitřní a střední ucho, sympatický nervový systém	Bolest hlavy, nervozita, nespavost, rýma, vysoký krevní tlak, migréna, chronický únavový syndrom, zapomnětlivost, chronická únava
10 Bederní 4	prostata, svaly kolem spodní části páteře, sedací nerv	ischias, bolest v kříži, časté močení, bolest zad
11 Křížový 1	Kyčelní kost, hýždě	Skolióza páteře, prostatitida, zánět močového měchýře, necitlivost nohou
12 Křížový 3	Konečník, řitní otvor	hemeroidy, svědění, bolesti kostrče
13 Bederní 2	Červovitý přívěšek slepého střeva, břicho, horní část nohou	Křeče, dušnost
14 Bederní 4	prostata, svaly kolem spodní části páteře, sedací nerv	Ischias, bolest v kříži, časté močení, bolest zad
15 Křížový 1	Kyčelní kost, hýždě	Skolióza páteře, prostatitida, zánět močového měchýře, Necitlivost nohou
16 Křížový 3	konečník, řitní otvor	hemeroidy, svědění, bolest kostrče


Režim 2

(relaxační)

Uvolňuje svaly, zmírňuje úzkost a stres.


→ Pozitivně působí na orgány a vnitřní soustavy spojené s páteří.

Operační doba : cca 18 minut

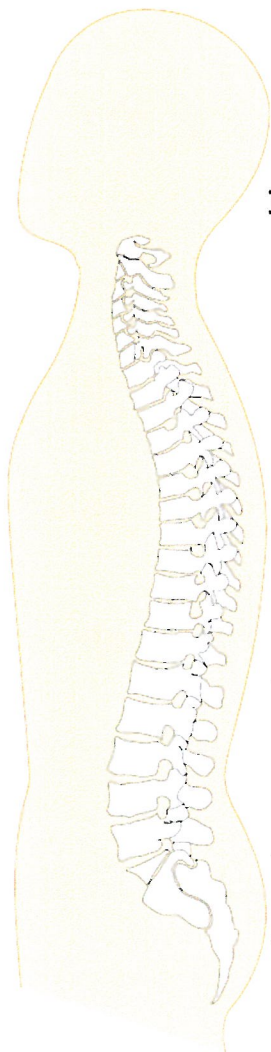

Bez "termální stimulace"

10초 대기

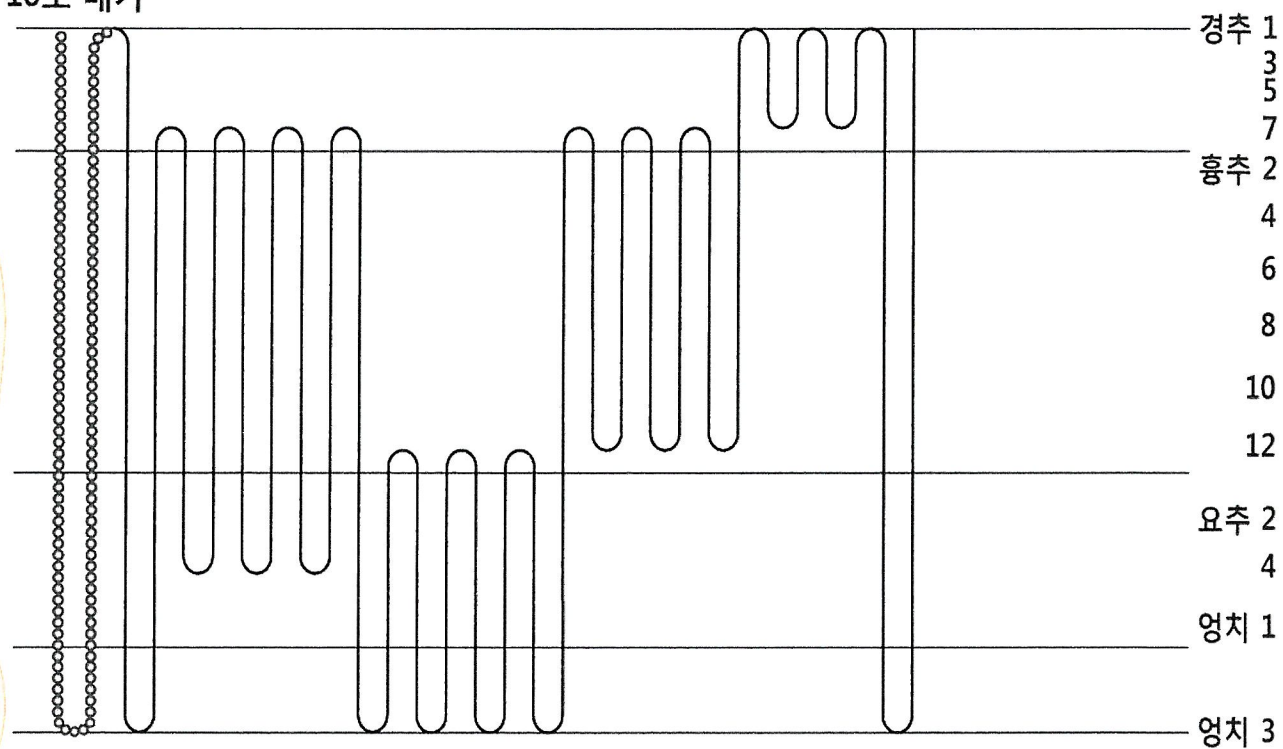


Režim 3

Zlepšuje funkce trávicího ústrojí.


→ Stimuluje orgány, které jsou součástí trávicí soustavy (slezina, žaludek, játra, žlučník, tenké střevo)

(pro zlepšení stability)

Operační doba : cca 36 minut 30 vteřin,
termální stimulace (60 vteřin)

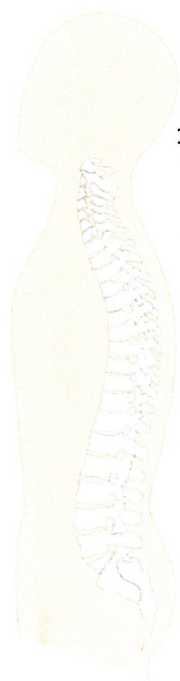

10초 대기

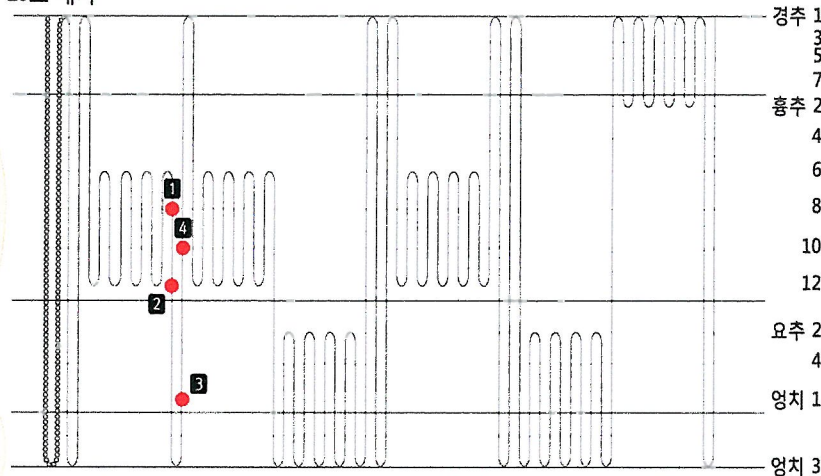

경추 1

3

5

7

흉추 2

4

6

8

10

12

요추 2

4

엉치 1

4

엉치 3

Obratle

1 Hrudní 8

2 Hrudní 12

3 Křížové 1

Hrudní 10

4

Část těla ovlivněna
nervovým spojením

slezina

Tenké střevo, lymfatický
systém

Kyčelní kost, hýždě

ledviny

Symptomy, které mohou
vzniknout tlakem na
nervová spojení

Nízká odolnost, nemoci
jater

revma, bolesti v důsledku
plynatosti, neplodnost

Skolióza páteře, prostatitida,
zánět močového měchýře,
necitlivost nohou

Onemocnění ledvin,
chronická únava, kornatění
tepen, zánět ledvin, zánět
pánvičky ledvinné


Režim 4

Zvyšuje příjem kyslíku a živin a napomáhá vylučování odpadních látek.


(zlepšuje oběh v těle)

→ Stimuluje autonomní nervovou soustavu, zrychluje krevní oběh – v žilách i tepnách.

Operační doba : cca 36 minut 30 vteřin,
termální stimulace (60 vteřin)

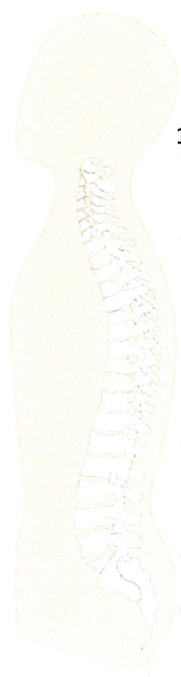

10초 대기

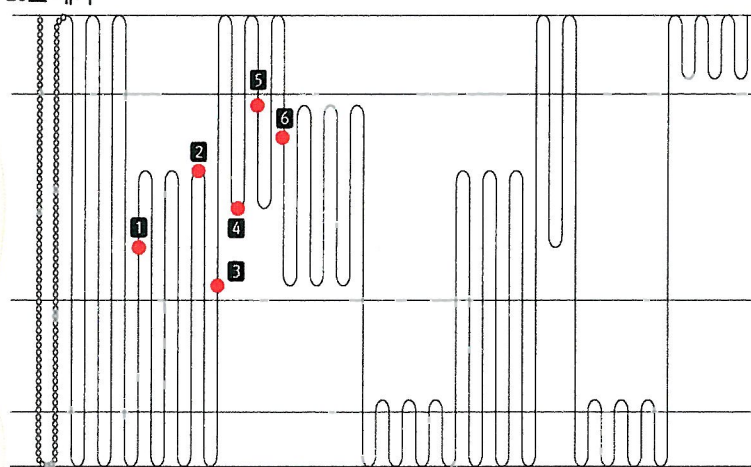

경추 1

3

5

7

흉추 2

4

6

8

10

12

요추 2

4

영치 1

영치 3

Obratle

1 Hrudní 10

2 Hrudní 6

3 Hrudní 12

4 Hrudní 8

5 Hrudní 2

6 Hrudní 4

**Část těla ovlivněna
nervovým spojením**

ledviny

žaludek

Tenké střevo, lymfatický
systém

slezina

srdce, tepny

žlučník

**Symptomy, které mohou
vzniknout tlakem na
nervová spojení**

Onemocnění ledvin,
chronická únava, kornatění
tepen, zánět ledvin, zánět
pánvičky ledvinné

Zažívací potíže, pálení žáhy

revma, bolesti v důsledku
plynatosti, neplodnost

Nízká odolnost, onemocnění
jater

Srdeční dysfunkce, bolest na
hrudi

žloutenka, pásový opar


Režim 5

(zvyšuje imunitu)


Zrychluje lymfatický oběh, zvyšuje imunitu, zvyšuje odolnost vůči patogenickým bakteriím a zabraňuje nemocem.

→ Stimuluje funkci jater, sleziny, červovitého přívěsku slepého střeva, krčních mandlí, mízy, což vede ke zvýšení imunity. Zrychluje oběh tkáňového moku.

*Operační doba : cca 36 minut 30 vteřin,
termální stimulace (60 vteřin)*

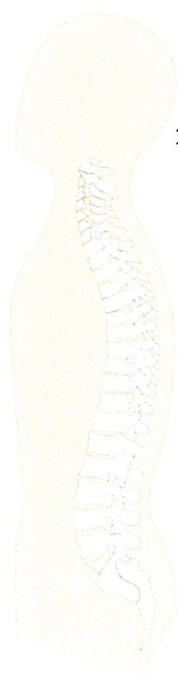

10초 대기

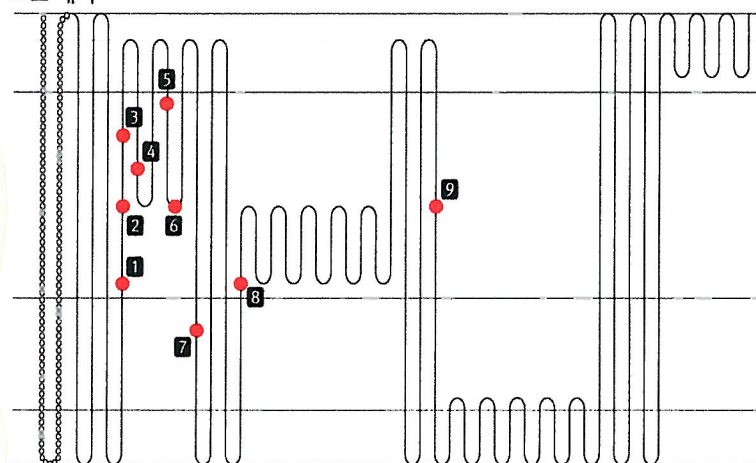

경추 1

3

5

7

흉추 2

4

6

8

10

12

요추 2

4

영추 1

3

영추 3

7

영추 3

7

영추 3

7

영추 3

7

영추 3

7

영추 3

7

영추 3

7

영추 3

7

영추 3

7

Obratle	Část těla ovlivněna nervovým spojením	Symptomy, které mohou vzniknout tlakem na nervová spojení
1 Hrudní 12	Tenké střevo, lymfatický systém	revma, bolesti v důsledku plynatosti, neplodnost
2 Hrudní 8	slezina	Nízká odolnost, onemocnění jater
3 Hrudní 4	žlučník	Žloutenka, pásový opar
4 Hrudní 6	žaludek	Pálení žáhy, zažívací potíže
5 Hrudní 2	Srdce, tepny	Srdeční dysfunkce, bolest na hrudi
6 Hrudní 8	Slezina	Nízká odolnost, onemocnění jater
7 Bederní 2	Červovitý přívěsek slepého střeva, břicho, horní část nohou	Křeče, dušnost
8 Hrudní 12	Tenké střevo, lymfatický systém	revma, bolesti v důsledku plynatosti, neplodnost
9 Hrudní 8	slezina	Nízká odolnost, onemocnění jater

Režim 6

(dodává energii)


Zlepšuje sexuální, reprodukční funkce a funkce močového ústrojí.

→ Pro zlepšení funkce močového ústrojí a sexuální funkce stimuluje slezinu, ledviny, močový měchýř, akupresurní body v oblasti hrudi.

*Operační doba : cca 36 minut 30 vteřin,
termální stimulace (60 vteřin)*



10초 대기

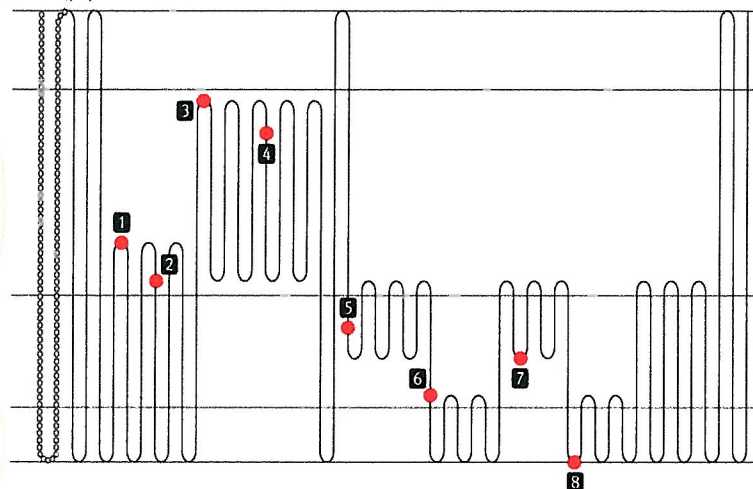

경추 1
3
5
7
흉추 2
4
6
8
요추 2
10
12
영치 2
4
영치 1
영치 3

Obratle	Část těla ovlivněna nervovým spojením	Symptomy, které mohou vzniknout tlakem na nervová spojení
1 Hrudní 10	Ledviny	Onemocnění ledvin, chronická únava, kornatění tepen, zánět ledvin, zánět pánvičky ledvinné
2 Hrudní 12	Tenké střevo, lymfatický systém	revma, bolesti v důsledku plynatosti, neplodnost
3 Hrudní 2	srdce, tepny	Srdeční dysfunkce, bolest na hrudi
4 Hrudní 4	žlučník	Žloutenka, pásový opar
5 Bederní 2	Červovitý přívěsek slepého střeva, břicho, horní část nohou	Křeče, dušnost
6 Křížové 1	Kyčelní kost, hýždě	Skolióza páteře, prostatitida, zánět močového měchýře, necitlivost nohou
7 Bederní 4	prostata, svaly kolem spodní části páteře, sedací nerv	ischias, bolest v kříži, časté močení, bolest zad
8 Křížové 3	konečník, řitní otvor	hemeroidy, svědění, bolest kostrče


Režim 7

(studijní)


Díky prokrvení hlavy a přísunu živin se vytváří zdroj energie a tím se zlepšuje soustředěnost.

→ Přispívá přísunu živin do hlavy a zajišťuje fyzickou stabilitu pánve.

Operační doba: cca 36 minut 30 vteřin,
termální stimulace

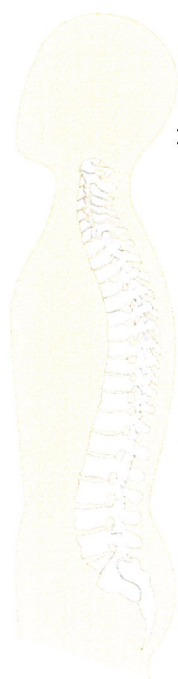

10초 대기

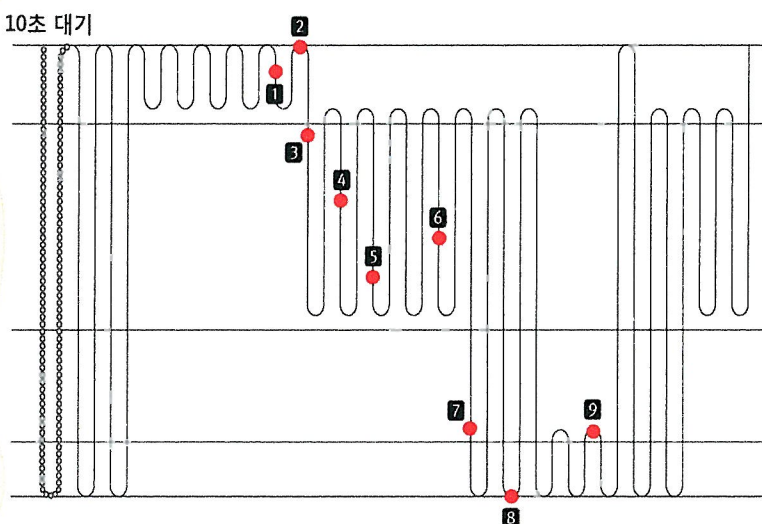

Obratle	Část těla ovlivněna nervovým spojením	Symptomy, které mohou vzniknout tlakem na nervová spojení
1 Krční 3	tvář, vnější ucho, obličejové kosti, zuby	neuralgie, neuritida, akné, ekzém
2 Krční 1	Prokrvení hlavy, hypofýza, kůže na temeni, obličejové kosti, mozek, vnitřní a střední ucho, sympatický nervový systém	Bolest hlavy, nervozita, nespavost, rýma, vysoký krevní tlak, migréna, chronický únavový syndrom, zapomnětlivost, chronická únava
3 Hrudní 2	srdce, tepny	Srdeční dysfunkce, bolest na hrudi
4 Hrudní 6	Žaludek	zažívací potíže, pálení žáhy
5 Hrudní 10	Ledviny	Onemocnění ledvin, chronická únava, kornatění tepen, zánět ledvin, zánět pánvičky ledvinné
6 Hrudní 8	Slezina	Nízká odolnost, onemocnění jater
7 Křížový 1	Kyčelní kost, hýždě	Skolióza páteře, prostatitida, zánět močového měchýře, necitlivost nohou
8 Křížový 3	koneční, řitní otvor	hemeroidy, svědění, bolest kostrče
9 Křížový 1	Kyčelní kost, hýždě	Skolióza páteře, prostatitida, zánět močového měchýře, necitlivost nohou

Režim 8

Napomáhá revitalizaci parasympatického nervového systému, podporuje kvalitu spánku.


(pro dobré spaní)

→ Stimuluje srdce, játra, ledviny, které jsou propojeny s parasympatickým nervovým systémem.

Operační doba : cca 36 minut 30 vteřin,
termální stimulace (60 vteřin)



10초 대기

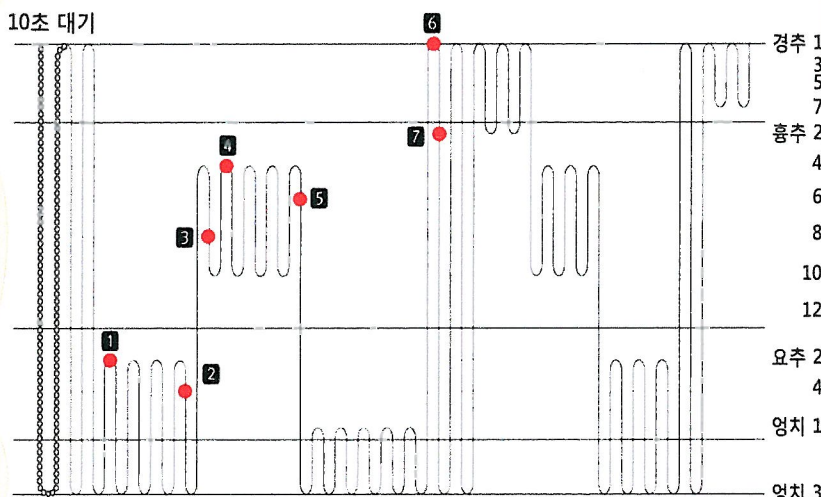

경추 1

3

5

7

흉추 2

4

6

8

10

12

요추 2

4

영치 1

3

영치 3

Obratle

1 Bederní 2

2 Bederní 4

3 Hrudní 8

4 Hrudní 4

5 Hrudní 6

6 Křční 1

7 Hrudní 2

Část těla ovlivněna
nervovým spojením

Červovitý přívěsek
slepého střeva, břicho,
horní část nohou

prostata, svaly kolem
spodní části páteře,
sedací nerv

Slezina

Žlučník

Žaludek

Prokrvení hlavy,
hypofýza, kůže na
temeni, obličejové kosti,
mozek, vnitřní a střední
ucho, sympatický
nervový systém

srdce, tepny

Symptomy, které mohou
vzniknout tlakem na
nervová spojení

Křeče, dušnost

Ischias, bolest v kříži, časté
močení, bolest zad

Nízká odolnost, onemocnění
jater

Žloutenka, pásový opar

Pálení žáhy, zažívací potíže

Bolest hlavy, nervozita,
nespavost, rýma, vysoký
krevní tlak, migréna,
chronický únavový syndrom,
zapomnětlivost, chronická
únava

Srdeční dysfunkce, bolest na
hrudi


Režim 9

(Body line)


Zlepšuje krevní oběh, napomáhá vylučování odpadních látek(toxinů), zvyšuje tělesnou energii a snižuje riziko obezity.

→ Soustředěnou stimulaci v oblasti zad napomáhá zrychlení metabolismu, krevního oběhu a revitalizaci parasympatického systému.

Operační doba : cca 36 minut 30 vteřin,
termální stimulace (60 vteřin)

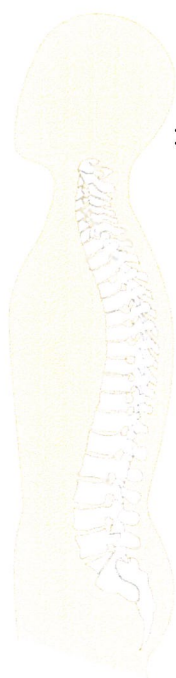

10초 대기

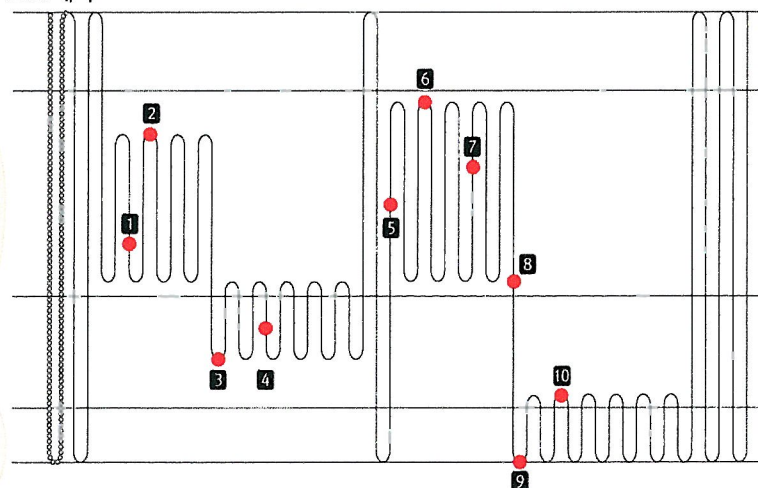

경추 1

3

5

7

흉추 2

4

6

8

10

12

요추 2

4

영치 1


3

영치 3

Obratle	Část těla ovlivněna nervovým spojením	Symptomy, které mohou vzniknout tlakem na nervová spojení
1 Hrudní 10	ledviny	Onemocnění ledvin, chronická únava, kornatění tepen, zánět ledvin, zánět pánevní ledvin
2 Hrudní 4	Žlučník	Žloutenka, pásový opar
3 Bederní 4	Prostata, svaly kolem spodní části páteře, sedací nerv	Ischias, bolest v kříži, časté močení, bolest zad
4 Bederní 2	Červovitý přívěsek slepého střeva, břicho, horní část nohou	Křeče, dušnost
5 Hrudní 8	Slezina	Nízká odolnost, onemocnění jater
6 Hrudní 2	Srdce, tepny	Srdeční dysfunkce, bolest na hrudi
7 Hrudní 6	Žaludek	Zažívací potíže, pálení žáhy
8 Hrudní 12	Tenké střevo, lymfatický systém	revma, bolesti v důsledku plynatosti, neplodnost
9 Křížový 3	Konečník, řitní otvor	Hemoroidy, svědění, bolest kostrče
10 Křížový 1	Kyčelní kost, hýždě	Skolióza páteře, prostatitida, zánět močového měchýře, necitlivost nohou

Poloautomatický režim

Operační doba : cca 18 minut

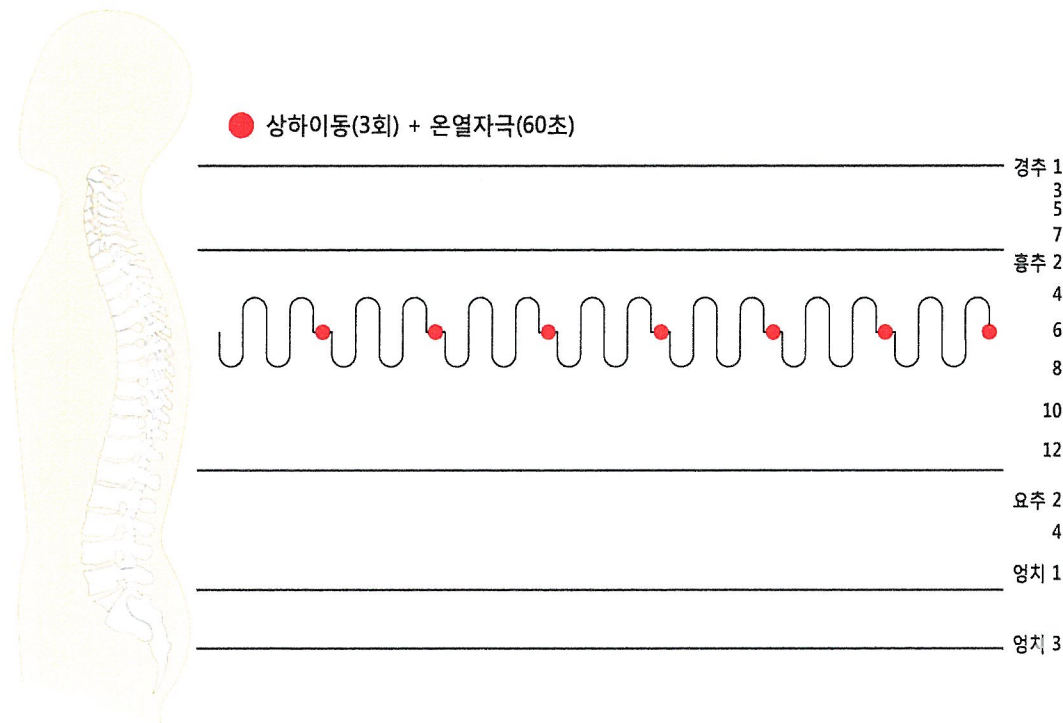

- vnitřní projektor provádí opakovanou masáž pouze v určité oblasti (9x)
 - horizontální pohyby (2x),
 - vertikální pohyby (3x),
 - termální stimulace (60vteřin)
- Uživatel si aplikaci masáže nastaví podle vlastních potřeb.